

# 知享椅 Smart Edge **Plus**


OG-6108 使用手册 / Use Manual

## 目录

安全说明	2
保修权限	5
产品结构	6
使用前说明	8
产品移动说明	9
控制器说明	10
操作说明	12
产品规格	18
异常情况	19
产品保养	20
联系我们	21
使用记录	23



融入生活 享受健康

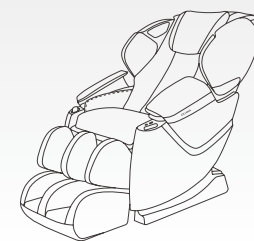

## 安全说明

# 警告!


此按摩椅必须使用和插头相匹配的插座。不正确的接地将会导致触电危险的发生。

请不要擅自改装插头或插座，务必委托专业的技术人员进行检查。


在使用电器产品时，为减少触电、灼伤、火灾、或人员伤害的危险，应遵守基本安全预防措施，包括以下内容：

在使用前请阅读所有的使用说明。

1. 务必使用和插头相配的插座。
2. 一定要确保插头完全插入插座内，以减少短路或火灾危险。
3. 在使用后或清洁前，请务必及时拔掉插头。
4. 请勿在高湿度的环境下使用本产品。
5. 请勿在室外或阳光直射的地方存放或使用本产品。
6. 如果在使用的过程中突然停电，请立即将开头拨至“O”的位置，且拔掉插头，以免来电时损坏本产品。
7. 当电源线潮湿或损坏时请勿使用按摩椅。
8. 请勿用湿手插入和拔掉插座，以免发生意外。
9. 当小孩、伤残人士、行动不便者在按摩椅附近或使用按摩椅时，一定要有人在场看护。
10. 只能将本产品用于本说明书中阐述的用途。

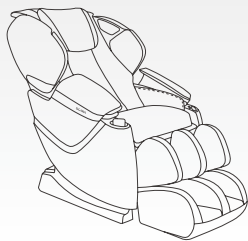


11. 不要使用非 OGAWA 推荐的附件。
12. 在使用过程中请勿坐在按摩椅小腿上，以免导致意外。
13. 请勿试图站在扶手或靠背上，以免按摩椅发生倾倒从而导致意外。
14. 按摩过程中请勿进入睡眠状态。
15. 请经常保持按摩椅清洁，避免将其他物体插入按摩椅的缝隙中。
16. 请勿直接通过拉扯电源线来移动按摩椅。
17. 请确保当降低小腿或靠背时，其下方无其他物体，特别是小孩。
18. 请在每次使用前，检查按摩椅靠背绒布等处是否有异常裂缝。如有异常，请勿使用并即时联系 OGAWA 售后服务中心。
19. 本产品仅为居家使用而设计。
20. 当您无法确定自己是否能使用按摩椅时，请先咨询医师。
21. 为避免因使用此按摩椅而导致不适或伤害，以下人士在使用本产品前应咨询医师：
  - 患有严重恶性肿瘤者
  - 患有严重心脏病者
  - 孕妇、产妇或月经期者
  - 刚做完手术，且伤口还没愈合者
  - 体内植入医用电子器械者
  - 因意外而造成脊髓疾病、脊椎骨折、肌肉拉伤或断裂者
  - 局部皮肤破损、溃疡、出血患者不适宜按摩。
22. 如在使用过程中觉得疼痛，请立即停止使用；如果在使用过程中受到损伤，请立即就医。
23. 请勿按摩红肿或发炎的皮肤。
24. 本产品仅为家庭提供舒适的按摩享受，并非专业的按摩医疗机械，

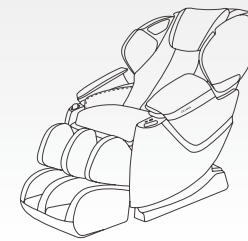


因此不能代替专业的治疗。

25. 建议每天使用按摩椅的时间为 30 分钟，按摩同一部位时间不宜超过 15 分钟，否则过度按摩会导致适得其反的效果，而且长时间使用会导致按摩椅过热并缩短产品使用寿命。
26. 请勿在喷气体溶胶或输氧的环境中使用本产品。
27. 12 岁或以下儿童不适宜用本产品。
28. 如果电源线损坏，必须使用 OGAWA 或合法代理商所提供的专用电源线。
29. 本产品配有加热功能，对热不敏感者慎用。

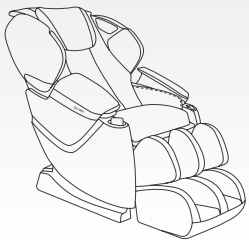


## 保修权限



1. 本保修权限不可转让。
2. 本保修服务仅对在 OGAWA 购买的产品有效。
3. 当要求保修服务时请出示正本购买凭据。
4. 在保修范围内的维修服务自购买之日起一年内有效。
5. 由于错误使用、不合理保养以及未经授权私自改装和维修此产品而导致的损坏，不属于保修范围。
6. 此保修范围不包括不属于产品本身的附件。
7. 此保修范围不适用于租赁、交易、商业、机构或其他非居民使用者。
8. 此保修范围所涉及的维修服务必须经过 OGAWA 授权，且必须由授权的技术人员维修。
9. 若需更换的维修附件缺货，OGAWA 有权采用替代配件进行维修。

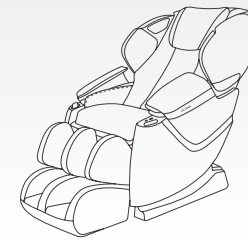

## 产品结构

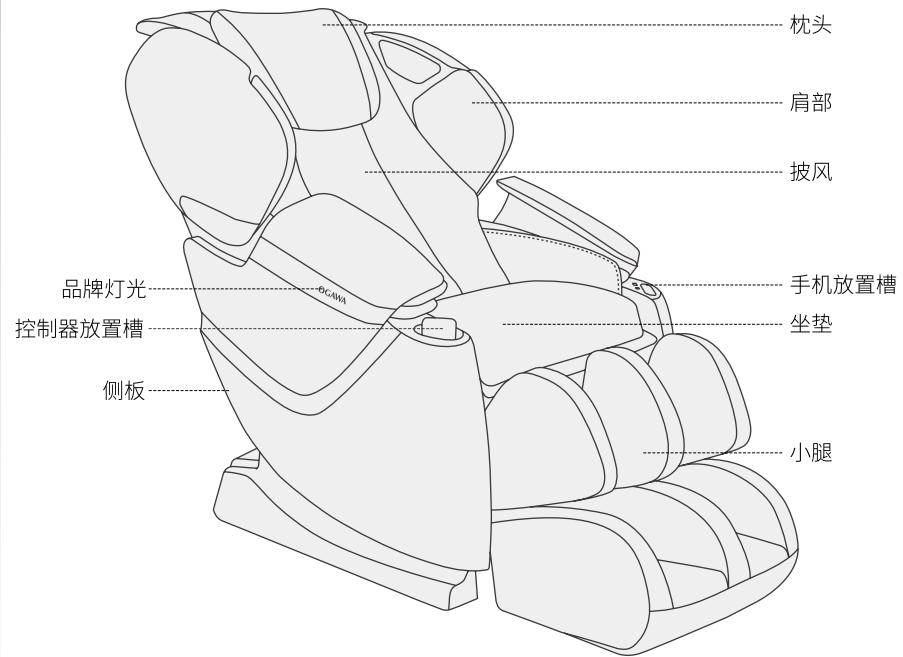


## 气囊按摩位置

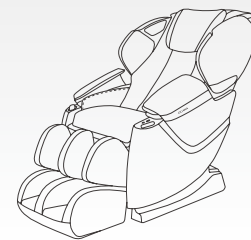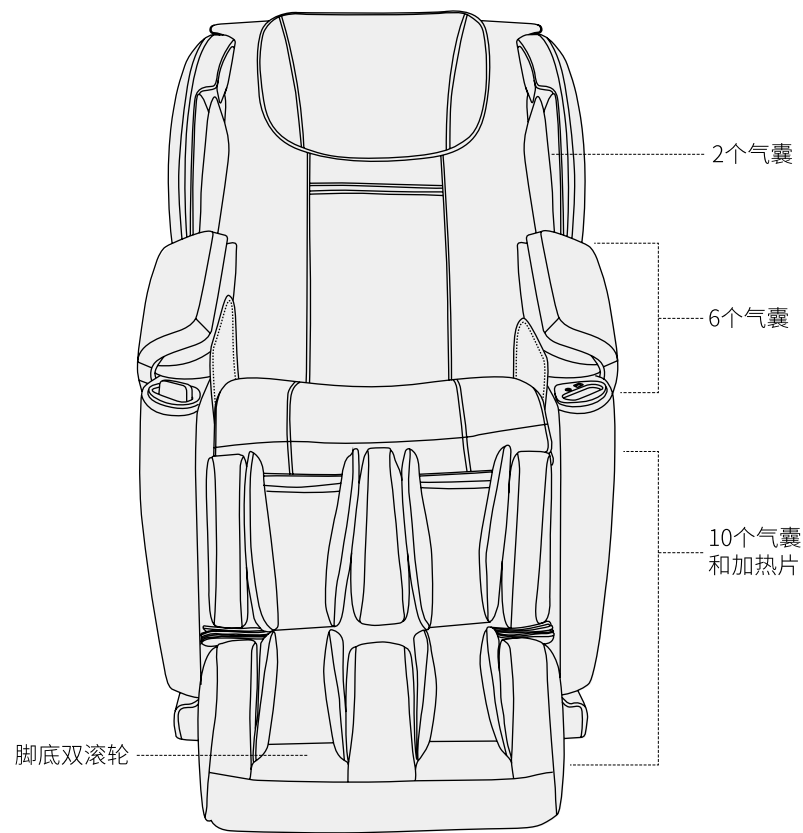


## 使用前说明

步骤一、按照安装说明书上步骤安装好按摩椅后，接通电源，将按摩椅座架下方的电源开关按至“I”的位置，按摩椅自动调节到复位状态。

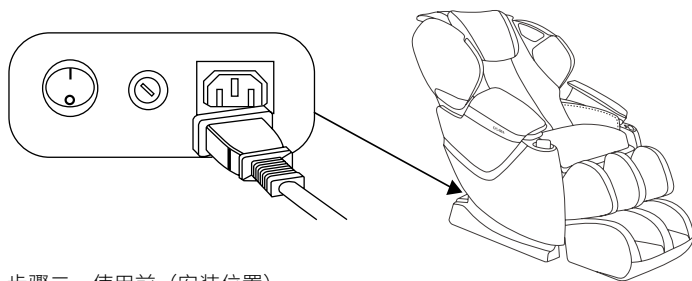

步骤二、使用前（安装位置）。  
确保足够空间以便按摩椅可以倾斜。


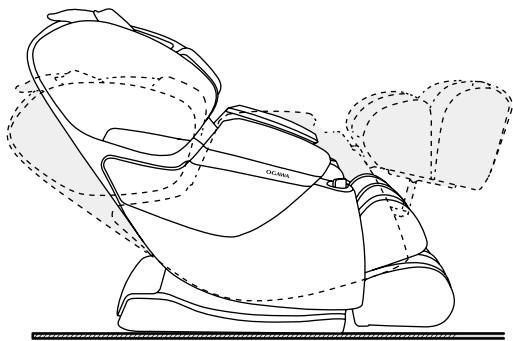


## 产品移动说明

拖起小腿垫，将椅背倾斜约 45 度以方便在室内自由移动按摩椅。

注意：

- i. 在移动按摩椅时一定要把腿垫完全收回，若不遵守，在移动过程中腿垫收到原始位置时，有可能导致受伤的情况。
- ii. 当有人坐在按摩椅上时，请不要移动椅子。
- iii. 移动按摩椅时可能会损伤地板，建议在本产品下铺上垫子等。

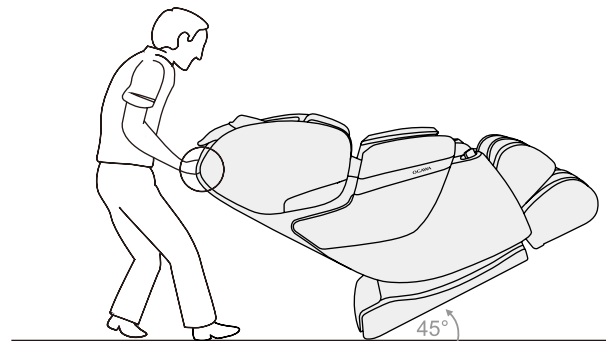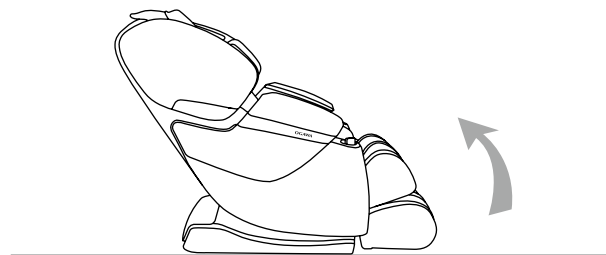


## 控制器说明



- 电源键开/关 1
- 2 暂停
- 定时 3
- 4 侧板品牌图案灯板控制
- 5 男士释压
- 6 颈肩舒缓
- 7 放松助眠
- 8 女士保养
- 9 腰臀重点
- 10 舒筋活络



- 11 抬腿
- 12 降压
- 13 零重力
- 14 起身/仰躺
- 15 起身/仰躺
- 16 手动按摩功能选择控
- 17 手动按摩模式切换
- 18 按摩力度/速度调节
- 19 按摩宽度调节
- 20 定点/区间
- 21 背部按摩高度上调节
- 22 背部按摩高度下调节
- 23 膝盖加热
- 24 全身气压按摩
- 25 局部气压按摩选择
- 26 气压强度
- 27 脚底滚轮

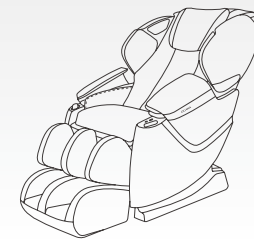

## 操作说明

●接通电源，将按摩椅座架下方的电源开关按至“1”的位置，按摩椅处于复位状态，椅背升到最高，腿垫降到最低。此时按摩椅进入待机状态，待机状态只有躺卧、起坐、抬脚、降脚、侧板品牌 LED 灯和开关，这 6 个功能可以操作。

### 按摩椅控制键

#### 1) 开 / 关

##### 整机按摩功能启停控制键

- 产品处于复位模式时按一下此键开机，手控器屏幕显示，此时按下任何按摩功能键开始接受按摩并启动定时功能。
- 产品处于运行状态时按一下此键关机，按摩轮、靠背和小腿回复到原有位置，同时开关键闪烁。

#### 2) 暂停

●如需暂停按摩功能，请按此键。此时所有按摩功能都将暂停，包括定时功能，再按此键则继续开启暂停之前的按摩功能及定时功能。

#### 3) 定时

●按摩程序启动时，自动设定功能时间为 15 分钟，每按一次定时功能，定时时间将按”15>20>25>30>5>10>15”循环。

#### 4) 侧板品牌图案灯板控制

●如需亮起品牌图案等，按下此键即可亮起白色灯光。再按一次，取消灯光。

### 自动按摩功能

●当 6 个自动按摩程序中任意一个启动之后，将对肩部的高度进行自动检测以达到最佳的按摩行程，同时也可根据需要者对按摩位置进行手动调整。

#### 5) 男士释压

#### 6) 颈肩舒缓

#### 7) 放松助眠

#### 8) 女士保养

#### 9) 腰臀重点

#### 10) 舒筋活络

#### 11/12) 抬腿 / 降腿

小腿角度调节


此功能键可调节小腿的角度。按一次升腿或降腿功能键以进行小腿角度调节。当小腿到达适当的角度时，再按一次升腿或降腿键即可定位。

#### 13) 零重力

按次此键启动零重力状态，再按此键则关闭零重力功能。

#### 14/15) 起身 / 仰躺

靠背角度调节

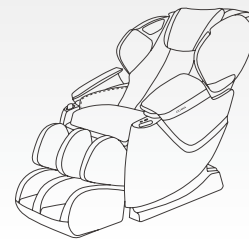



通过这两个控制键可以调节按摩椅靠背角度，按一次起身 / 仰躺，按摩椅靠背角度将进行调节，当调节至适当位置时，再按一次起身 / 仰躺中的其中任一控制键即可定位。

## 16) 手动按摩功能选择控

### 揉捏、瑞典式、捶打、指压、拍打、推拿手法选择

按一次此控制键启动全背部揉捏按摩功能，每按一次此控制键将按顺序切换“揉捏 > 瑞典式 > 捶打 > 指压 > 拍打 > 推拿 > 停止”循环的按摩手法。

## 17) 手动按摩模式切换

在手动功能启动时，按此控制键可在手动按摩手法模式 1 与模式 2 之间切换。

## 18) 按摩力度 / 速度调节

### 背部按摩力度 / 速度调节键 --5 档可调


- 在启动手动程序的揉捏按摩功能后，每按一次此键，按摩力度将按由弱到强的顺序循环调节。

- 在启动手动程序的瑞典或捶打、指压、拍打按摩功能后，每按一次此键，按摩速度将按由弱到强的顺序循环调节。

## 19) 按摩宽度调节

### 背部按摩宽度调节键——3 档可调

按摩功能宽度调节在启动在捶打式、指压式、拍打式、推拿式的按摩过程可按此键对按摩头进行宽度调节，共 3 档（窄、中、宽循环进行）。

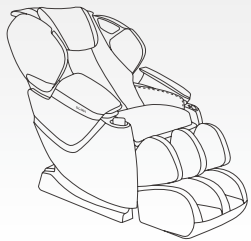

## 20) 定点 / 区间

### 背部定点功能

- 此键用于启停靠背部定点按摩功能。在所需按摩的位置单击此键将对该按摩位置提供集中的定点按摩。再单击切换到区间功能。

### 区间功能

- 此键用于启停靠背部区间按摩功能。则在原点上下 8CM 的区间内提供背部区间按摩，再单击此键则解除背部“定点 / 区间”按摩功能。

## 21/22) 背部按摩高度上下调节

当手动或自动扫描到的行程无法满足个人要求时，可以在按摩椅发出提示音 10 秒内，持续按住上 / 下键，按摩滚轮将根据您的需求上行或下行，至适宜的位置释放此键，即可锁定上限的按摩行程，以达到微调的目的。注意：在定点或区间按摩时，也可通过这两个按键来调节按摩位置。

## 23) 膝盖加热


按此键开启膝盖加热功能，再按一次停止加热功能。

## 24) 全身气压按摩

按此键开启全身气压按摩，再按一次取消全身气压按摩。

## 25) 局部气压按摩选择

按此键开启以“腿部气压 > 手部气压 > 肩部气压 > 关闭”的循环方式气压按摩。

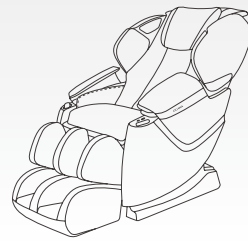

## 26) 气压强度

### 气压按摩强度调节 -5 档可调

全身或局部气压按摩模式下，每按一次此键将对气压按摩强度进行由弱到强循环调节。


## 27) 脚底滚轮

按此键开启脚底滚轮按摩功能。再按一次停止此功能。

### 操作完成

●使用完毕之后，按下“开/关”键，此时按摩椅将停止操作，按摩滚轮将自动复位，与此同时开关键闪烁，按摩轮复位。此时，请按下按摩椅靠背下方的电源开关至“0”的位置，接着拔出电源线。

### 快捷按键操作说明

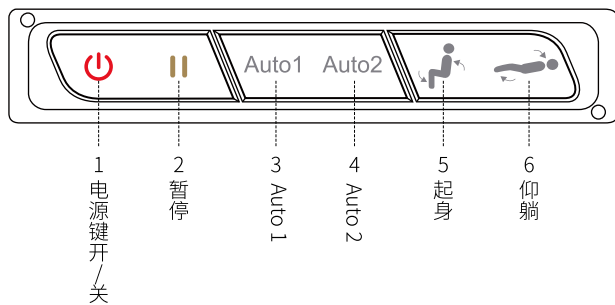

## 1) 开 / 关

### 整机按摩功能启停控制键

●产品处于复位模式时按一下此键开机，手控器屏幕显示，此时按下任何按摩功能键开始接受按摩并启动定时功能。

●产品处于运行状态时按一下此键关机，按摩轮、靠背和小腿回复到原有位置，同时手控器开关键闪烁。

## 2) 暂停

如需暂停按摩功能，请按此键。此时所有按摩功能都将暂停，包括定时功能，再按此键则继续开启暂停之前的按摩功能及定时功能。

### 自动按摩功能

当自动按摩程序中任意一个启动之后，将对肩部的高度进行自动检测以达到最佳的按摩行程，同时也可根据需要者对按摩位置进行手动调整。


## 3) Auto 1

## 4) Auto 2

## 5/6) 起身 / 仰躺


### 靠背角度调节

通过这两个控制键可以调节按摩椅靠背角度，按一次起身 / 仰躺，按摩椅靠背角度将进行调节，当调节至适当位置时，再按一次起身 / 仰躺中的其中任一控制键即可定位。

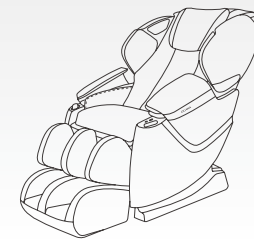

## 产品规格

产品名称	Smart Edge Plus 知享椅
型号	OG-6108
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
额定功率	160W
自动定时	15 分钟
最大工作时间	15 分钟
尺寸 (长 × 宽 × 高)	直立状态 :153x77x116cm 倒背状态 :184x76x87cm
重量	毛重 :120kg
	净重 :101kg
线长	手控器线长 : 约 1.5 米
	电源线长 : 1.8 米
使用环境	温度 : 0°C -35°C
	湿度 : 20-80RH
储存环境	温度 : -5°C -35°C
	湿度水平 : 20-80RH
安全装置	具有过热、过压和过流保护
按摩头	4 个

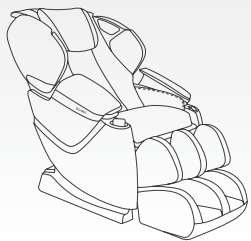


## 异常情况

此按摩椅为微电脑控制，对电压波较为敏感。如果电压波动超过限定电压 +10% 或 -15%，按摩椅可能出现以下情况。


可能出现的异常情况	处理方法
插上电源，但按摩椅无法操作	1) 检查电源插头是否插好或是否通电 2) 检查按摩椅后下方的电源开关是否处于“I”的位置
使用过程中，控制器可以操作，但按摩椅无法操作	长时间操作后，按摩椅引擎的温度若过高，按摩椅将自动处于温度保护状态。请关闭电源并暂停使用 30~50 分钟以上让引擎内部散热。
使用过程中，控制器无法操作，按摩椅也无法操作	1) 在自动定时功能启动后，若定时时间已到，请重新按键即可操作。 2) 关掉电源，重新通电启动按摩椅

若以上处理方法无效，参阅《产品保修卡》，联系 OGAWA 服务中心。

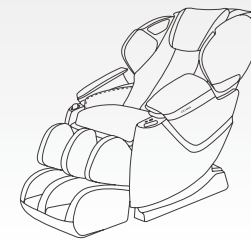

## 产品保养

- 避免用水或其他化学剂来清洗按摩椅。
- 避免重压、硬物敲击、强拉、刮花按摩椅表面。
- 操作时请轻触按键，避免以指甲按压。
- 使用后请立即拔出电源插头。
- 建议使用时间不超过 30 分钟，不宜过长过度使用将导致适得其反的效果。

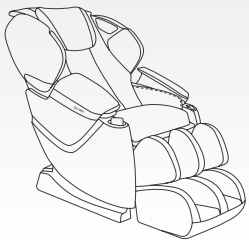


## 联系我们

厦门蒙发利营销有限公司  
地址：厦门市思明区前埔路 168 号  
邮编：361008  
服务热线：400-885-9880

华东区域  
洽谈电话：021-62120981  
地址：上海市普陀区曹杨路 505 号 901 室（尚诚国际大厦）

华北区域  
洽谈电话：010-58670435  
地址：北京市朝阳区东三环南路 58 号富顿中心 A 座 2309-2310 室  
洽谈电话：0311-83830323  
地址：河北省石家庄市桥西区中山西路 188 号中华商务中心 A 座 501

华中区域  
洽谈电话：027-85605586  
地址：武汉江汉区北湖西路城市之光 B 栋 2 单元 1101 室

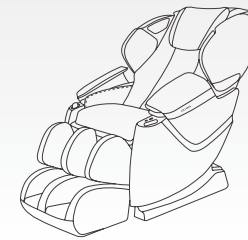



销售商：厦门蒙发利营销有限公司  
地 址：厦门市思明区前埔路 168 号



奥佳华官方微信二维码



奥佳华官方微博二维码